


FRED PA-1

Eenvoud als prioriteit



FRED PA-1

Speciaal voor gebruik op openbare plaatsen heeft SCHILLER zijn nieuwste defibrillator zo ontwikkeld dat zelfs ongetrainde gebruikers levens kunnen redden. De PA-1 gidst de redder stap per stap door het hele reanimatieproces.

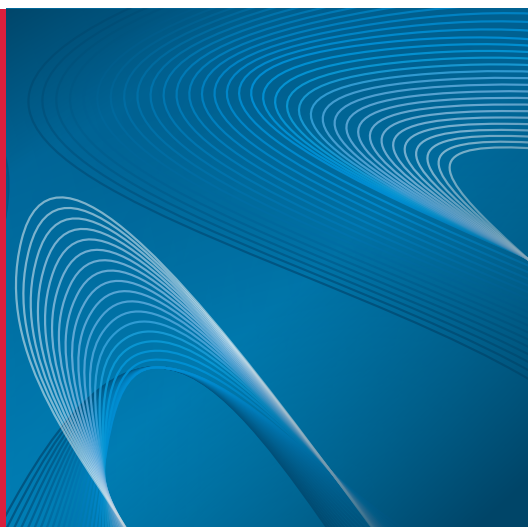

HET BELANGT ONS ALLEMAAL AAN

Meer dan 7 miljoen mensen zijn jaarlijks het slachtoffer van een plots hartfalen. Hartfalen kan iedereen, op elke plaats en moment treffen. Defibrillatie bestaat erin elektrische energie te leveren aan het hart om zo

een goed hartritme te herstellen. Een AED in combinatie met goed uitgevoerde borstcompressies is de enige therapie die het leven van een patient kan redden. De PA-1 is een goed ontworpen levensreddend toestel dat bovendien erg zichtbaar en herkenbaar is in elke soort omgeving.



UITERST GEBRUIKSVRIENDELIJK

In een noodsituatie kan een procedure die anders helder en makkelijk is om uit te voeren, plots verwarrend worden. Elk detail telt en kan het verschil maken tijdens de reanimatie. Dat is de reden waarom een AED zo eenvoudig mogelijk moet zijn!

1-2-3 STAPPEN

Niet alleen is de user interface duidelijk opgebouwd. In 1-2-3 stappen, ook de gesproken instructies en duidelijke tekeningen gidsen de gebruiker doorheen het hele proces.

GEEN VERTRAGING

Wanneer je het deksel van de AED optilt start de PA-1 onmiddellijk op. De electrodes zijn pregeconnecteerd, bevestig deze op de patient en laat het toestel je verder leiden.

SHOCK AFGIFTE IS MOGELIJK VAN ZODRA DEZE AANGEWEZEN IS!

Resuscitation Guidelines onderstrepen het belang van een snelle shock na CPR. Om deze laadtijd zo kort mogelijk te houden (tijd waarin geen CPR kan uitgevoerd worden) bevat de FRED PA-1 een snel analyse systeem dat systematisch start met opladen zodat de shock reeds afgegeven wordt op het moment dat deze aangegeven blijkt te zijn.



NOODNUMMER

De FRED PA-1 adviseert de redder eerst de nooddiensten te bellen en geeft een indicatie van het juiste nummer (personaliseerbaar)



SNELLE SET-UP


Pregeconnecteerde electrodes zorgen voor een sneller aanbrengen van de electrodes op de borst van de patient, analyse start automatisch.

ALTIJD GEBRUIKSKLAAR

De FRED PA-1 voert een automatische zelftest uit en geeft zijn gereedheid aan.

MAKKELIJK TE DRAGEN

Neem het toestel met 1 hand en loop snel naar de plaats van het incident.

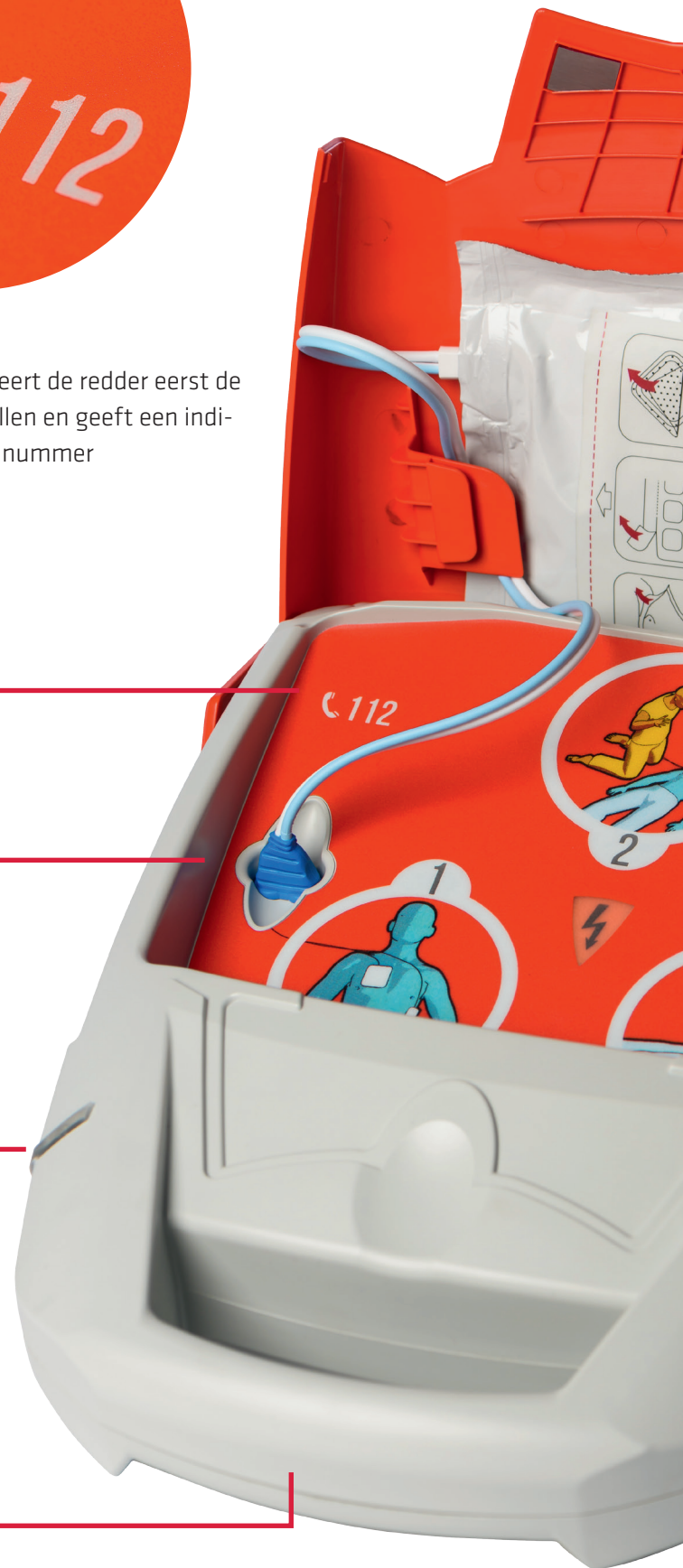



GEEN VERTRAGING

Wanneer het deksel wordt opgetild start de FRED PA-1 onmiddellijk en automatisch op.

ELECTRODE VAKJE

Electrodes zijn onmiddellijk ter beschikking en makkelijk herkenbaar.

HERHAAL FUNCTIE

Maak u geen zorgen moest u informatie hebben gemist: druk de "herhaal" knop om zo de laatst gesproken instructie opnieuw te horen.

DUIDELIJKE GEBRUIKERS INTERFACE

1-2-3 stappen



DUIDELIJKE STATUS AANDUIDING

Wanneer een nazicht wenselijk is geeft de FRED PA-1 een waarschuwing: zowel akoestische signalen als LED's geven de status van de AED weer en de acties die genomen dienen te worden (vervanging batterij, electrodes,)



OVERAL TE GEBRUIKEN

Plots hartfalen kan iedereen en overal voorkomen. De FRED PA-1 is ontworpen om overal te gebruiken, waar u hem nodig heeft. Door de mogelijkheid uit drie talen te kiezen¹, kan de PA-1 perfect geïnstalleerd worden in alle internationale omgevingen zoals luchthavens, hotels, trein stations,

Dankzij de hoge IP graad (IP 55 tegen stof en water) weerstaat de FRED PA-1 zelfs de meest oncomfortabele situaties.

AUTOMATISCH OF SEMI-AUTOMATISCH

De FRED PA-1 analyseert het hartritme van de patient en geeft aan of een shock is aangewezen of niet. Hulpverleners mogen volledig vertrouwen op het resultaat van deze analyse, die gebaseerd is op bewezen algoritmes en tientallen jaren ervaring.

De FRED PA-1 is beschikbaar in een semi of full automatische versie.

Het afgeven van een shock aan een slachtoffer van hartfalen dient zo snel mogelijk te gebeuren. De FRED PA-1 full automatic geeft de shock zonder dat er enige actie van de hulpverlener gevraagd wordt. In de semi

automatische versie vertelt de PA-1 de hulpverlener de shock te geven door op de shock knop te drukken.

DATA MANAGEMENT

De FRED PA-1 kan tot 2h data van de interventie opslaan, inclusief 500 events. Dankzij een eenvoudige SD kaart kan een snel uitlezen van de data alsook enige software updates eenvoudig gebeuren.

¹ De 3 talen optie kan gepersonaliseerd worden op het moment van bestelling.

HET ZIJN DE DETAILS DIE HET VERSCHIL MAKEN

MOGELIJKHEID TOT UITBREIDING GARANTIE VAN 10 JAAR¹

SCHILLER biedt zielsrust dankzij de 10 jaar garantie mogelijkheid. Uw toestel wordt eenvoudig onder garantie vervangen door een nieuw device.

GEREED WANNEER U DE AED NODIG HEEFT

De levensduur van de FRED PA-1 batterij is lang en bedraagt 6 jaar. Het batterij niveau wordt getest middels een zelftest en een LED licht waarschuwt u voor een laag niveau.

CHECK VERVALDATUM ELECTRODES

Dankzij een innovatieve technologie is het toestel in staat te bepalen wanneer de vervaldatum van de electrodes nadert en zal u aanraden de pads te vervangen.

¹ contacteer uw lokale vertegenwoordiger voor meer informatie

VOOR ALLE TYPES PATIËNTEN


De FRED PA-1 herkent automatisch het gebruik van volwassene of pediatrische pads en zal afhankelijk van de pad het energie level aanpassen tijdens defibrillatie.

Achteraan het toestel kan u eenvoudig een paar kinder electrodes wegbergen.

CPR-FEEDBACK

Defibrillatie is niet genoeg. De bloedcirculatie moet behouden blijven om zo de organen van levensnoodzakelijk O₂ te blijven voorzien. Daarom is het noodzakelijk borstcompressies toe te passen en dit op een correcte manier. De FRED PA-1 helpt je efficiënter hartmassage toe te passen:

- ❖ geeft de juiste plaatsing van de handen aan
- ❖ de metronoom indiceert een regelmatig ritme
- ❖ geeft dadelijk feedback betreffende de frequentie van de borstcompressies, gebaseerd op de impedantie, dit zonder enige extra sensor (FreeCPR).

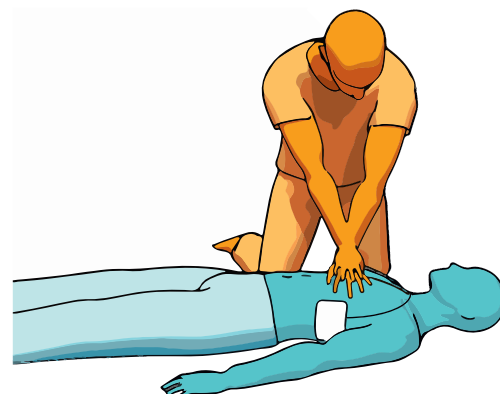



Americas
SCHILLER Americas Inc.
Doral, Florida 33172

North America:
Phone +1 786 845 06 20
Fax +1 786 845 06 02
sales@schilleramerica.com
www.schilleramerica.com

Latin America & Caribbean
Phone +1 305 591 11 21
Fax +1 786 845 06 02
sales@schillerla.ch
www.schillerla.ch



Asia
SCHILLER Asia-Pacific / Malaysia
52200 Kuala Lumpur, Malaysia
Phone +603 6272 3033
Fax +603 6272 2030
sales@schiller.com.my
www.schiller-asia.com



Austria
SCHILLER Handelsgesellschaft m.b.H.
A-4040 Linz
Phone +43 732 70 99
Fax +43 732 757 000
sales@schiller.at
www.schiller.at



China
Alfred Schiller (Beijing) Medical Equipment Co., Ltd.
100015 Beijing, China
Phone +86 010 52007020
Fax +86 010 52007020-8016
info@schillerchina.com
www.schillermedical.cn



Croatia
Schiller medicinski instrumenti d.o.o.
10000 Zagreb
Phone +385 1 309 66 59
Fax +385 1 309 66 60
info@schillerz.hr
www.schiller.hr



France
SCHILLER Médical S.A.S.
F-67162 Wissembourg
Phone +33 3 88 63 36 00
Fax +33 3 88 63 36 49
info@schiller.fr
www.schiller-medical.com



France (distribution France)
SCHILLER France S.A.S.
F-77608 Bussy St Georges
Phone +33 1 64 66 50 00
Fax +33 1 64 66 50 10
contact@schillerfrance.fr
www.schiller-france.com



Germany
SCHILLER Medizintechnik GmbH
D-85622 Feldkirchen b. München
Phone +49 89 62 99 81 0
Fax +49 89 609 50 90
info@schillermed.de
www.schillermed.de



Hungary
SCHILLER Diamed Ltd.
H-1141 Budapest
Phone +36 1 383 4780 / +36 1 460 9491
Fax +36 1 383 4778
info@schillerhungary.hu
www.schillerhungary.hu



India
SCHILLER Healthcare India Pvt. Ltd.
Mumbai - 400 059, India
Phone +91 22 6152 3333 / 2920 9141
Fax +91 22 2920 9142
sales@schillerindia.com
www.schillerindia.com



Poland
SCHILLER Poland Sp. z o.o.
PL-02-729 Warszawa
Phone +48 22 843 20 89 / +48 22 647 35 90
Fax +48 22 843 20 89
schiller@schiller.pl
www.schiller.pl



Russia & C.I.S.
AO SCHILLER.RU
125124 Moscow, Russia
Phone +7 (495) 970 11 33
Fax +7 (495) 956 29 10
mail@schiller.ru
www.schiller.ru
www.schiller-cis.com



Serbia
SCHILLER d.o.o.
11010 Beograd
Phone +381 11 39 79 508
Fax +381 11 39 79 518
info@schiller.rs
www.schiller.rs



Slovenia
SCHILLER d.o.o.
2310 Slovenska Bistrica
Phone +386 2 843 00 56
Fax +386 2 843 00 57
info@schiller.si
www.schiller.si



Spain
SCHILLER ESPAÑA, S.A.
ES-28232 Las Rozas/Madrid
Phone +34 91 713 01 76
Fax +34 91 355 79 33
schiller@schiller.es
www.schiller.es



Switzerland
SCHILLER-Reomed AG
CH-8953 Dietikon
Phone +41 44 744 30 00
Fax +41 44 740 37 10
sales@schiller-reomed.ch
www.schiller-reomed.ch



Turkey
SCHILLER TÜRKİYE
Okmeydanı-Sisli - Istanbul
Phone +90 212 210 8681 (pbx)
Fax +90 212 210 8684
info@schiller.com.tr
www.schiller-turkiye.com



United Kingdom
SCHILLER UK
Bellshill, ML4 3PR
Phone +44 1698 744 505
Fax +44 1698 744 474
sales@schilleruk.com
www.schilleruk.com



SCHILLER
The Art of Diagnostics